



移動式スマートリフトバス ER-200

エリーゼ・ロス

寝浴の新しい可能性

運べて、


安心、

コンパクト。



「人」の「心」と「体」をあたためる

○ 外観図

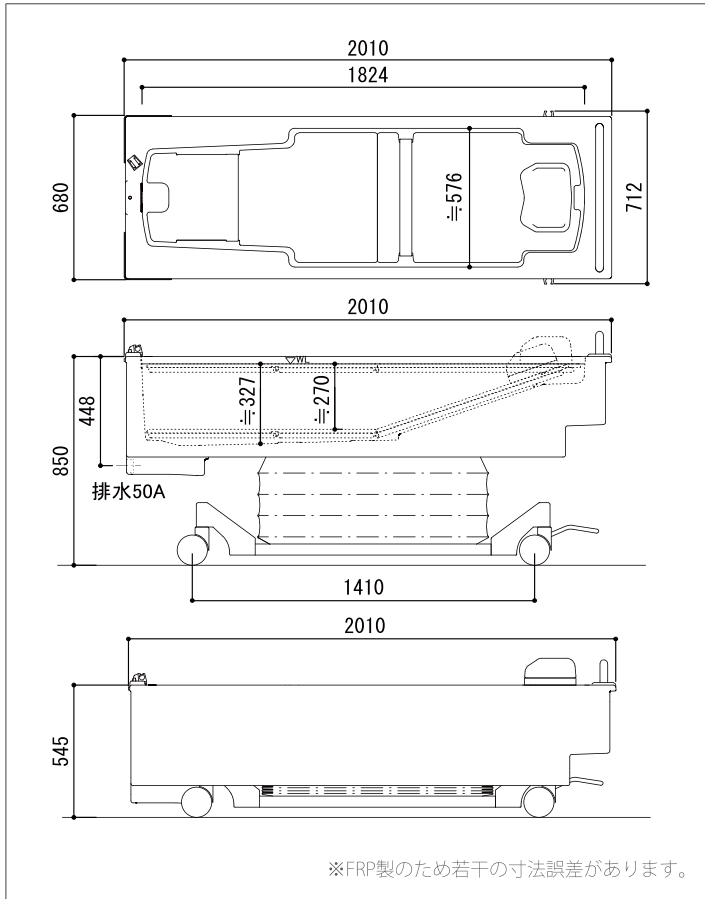

○ 仕様／ER-200

外形寸法	L2010×W680(712シャワー部)×H650~965mm
浴槽内寸法	L1824×W576×D327mm(最深部)
担架面	高さ545~850mm
実使用湯量	約158L(入浴者60kgにての目安)
重量	約135kg(満水時360kg)
入浴者最大重量	約80kg
電源	DC24V(バッテリー仕様)
駆動方式	独立2段昇降式電動アクチュエーター
昇降回数	バッテリー1回満充電あたり約34回 (入浴者80kg実水量での目安)
移動性能	直進初動操作力約3.5kg、旋回初動操作力約3.8kg(最大負荷時)
キャスター	φ125mm(4輪ブレーキ集中ロック方式)
排水	大口径50A排水(樹脂フレキホース)
付帯機能	移動用大型キャスター、ツインアクション、自動リクライニング機能、非保持型スイッチ(スイッチON時のみ動作)、バッテリー、バッテリー充電器、バッテリー残量計、停電時緊急降下ボタン、やわらかマットベッド、ヘッドレスト(スライド調整式)、安全ベルト、シャワーフック、体重別節水ライン、排水ホース(2m)
価格	¥3,900,000 ※価格は税別本体価格です。

※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することがあります。

入浴も洗体も、これひとつ。省スペースで安心の寝浴を実現。

● 図示について

— : マットベッドの形

→ : マットベッドの動き

→ : 浴槽の動き

移乗

浴槽の高さを車椅子やベッドに合わせられ、移乗が容易です。

入浴

マットベッドのリクライニングにより身体がお湯の中へ。

洗体

お湯からあがった状態で身体を洗えます。



取扱店

○ 定期点検のご案内

エリーゼ・ロスを末永く安全にお使いいただくために、保守点検契約をおすすめします。保守点検契約については、取扱店またはメトス各営業所へご連絡ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。

〒104-0045 東京都中央区築地 6-16-1 築地 616ビル

TEL 03-3542-0333 FAX 03-3542-6765 ホームページ <http://metos.co.jp>

昭和飛行機グループ

株式会社メトス



■ 札幌営業所	〒060-0041	北海道札幌市中央区大通東7丁目	ノースシティ大通ビル	TEL 011-272-3201
■ 仙台営業所	〒981-3135	宮城県仙台市泉区八乙女中央1-7-5	八乙女オフィスビル	TEL 022-771-5242
■ 東京営業所	〒104-0045	東京都中央区築地6-16-1	築地616ビル	TEL 03-3542-3455
■ 名古屋営業所	〒465-0004	愛知県名古屋市中区東区香南2丁目	1039-1	TEL 052-769-6144
■ 大阪営業所	〒550-0004	大阪府大阪市西区靱本町1-6-6	大阪華東ビル	TEL 06-4803-0168
■ 福岡営業所	〒812-0015	福岡県福岡市博多区山王1-1-32	博多堀池ビル	TEL 092-471-5801