

# Slope Ace 介護用昇降機 / スロープエース

快適な入浴 / シンプルな操作

## 基本は安心・安全。

- ・堅牢な A フレームは、アンカー不要で取り付けが簡単。
- ・介護する方の負担を軽減する、業界最軽量クラスのホイールチェア。
- ・安全に配慮し、電源は DC24V を採用。



リラックスした入浴姿勢を保持できるホイールチェアと、自然なスロープを形成した A フレームとの組合せ。ボタンを押すだけの簡単な操作でゆっくりをスロープを降り入浴。日本の介護入浴を語る上で欠かす事のできないロングセラーです。



A フレームとホイールチェアのドッキング



リフターの前方へ移動



リフターを下降させ入浴



スロープエース Aセット価格		
スロープエース SA-220A	1台	¥3,650,000
ホイールチェア SA-220W	1台	¥600,000
電源ボックス	1台	¥150,000
セット合計		¥4,400,000

スロープエース Bセット価格		
スロープエース SA-220A	1台	¥3,650,000
ホイールチェア SA-230WR	1台	¥800,000
電源ボックス	1台	¥150,000
セット合計		¥4,600,000

※電源ボックスのみの購入は課税 ※価格はすべて税別本体価格です。



# Slope Ace 介護用昇降機 / スローペース



A フレーム SA-220A  
アンカー施工不要で設置できる  
中間浴用のリフトです。




ホイルチェア SA-220W  
フラットで移乗しやすい座面、業界トップ  
クラスの軽さを備えた、シンプルな入浴用  
の車椅子です。



ホイルチェア SA-230WR  
SA-220W の機能にヘッドレストとチルト機能を追加、より重度な方の入浴  
に対応しています。

## ◆外形図

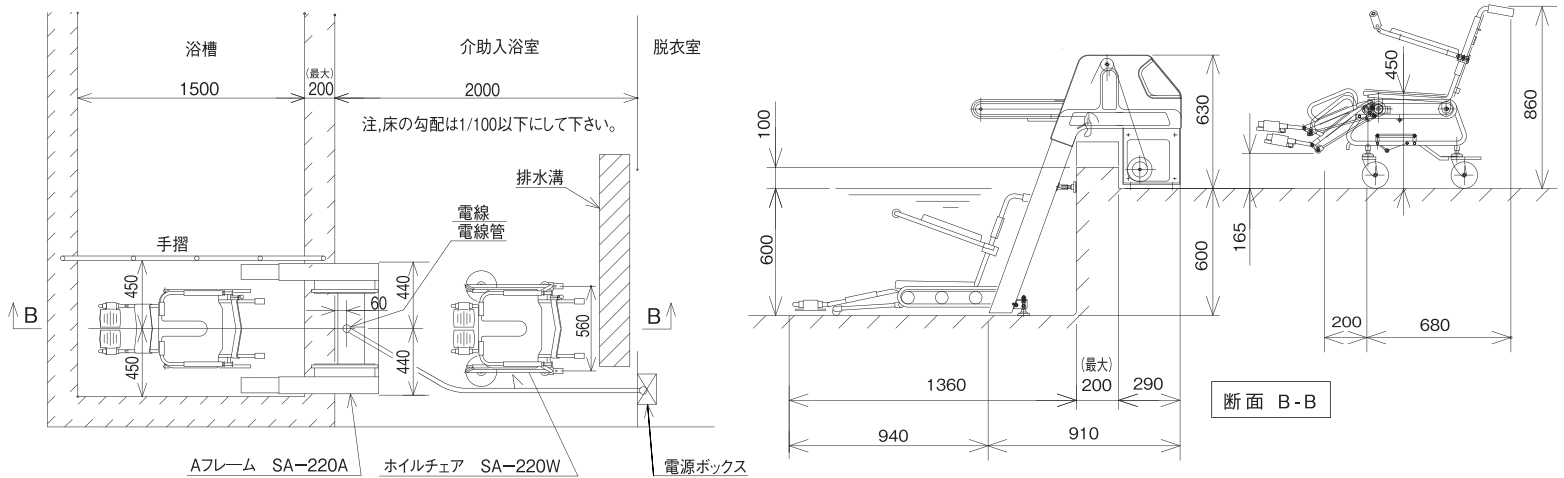

## ◆仕様

### AフレームSA-220A

本体寸法/重量	長さ:910mm 幅:880mm 高さ:1230mm 重量:約120kg
昇降機構	電動式
最大利用重量	100kg

昇降操作	押しボタンスイッチ
昇降速度	55~75mm/sec
材質	ステンレスSUS304
電源	DC24V

### ホイルチェアSA-220W

本体寸法/重量	長さ:1175mm 幅:557mm 高さ:860mm 重量:約20kg
材質	ステンレスSUS304(フレーム) プラスチック(シート)

### ホイルチェアSA-230WR

本体寸法/重量	長さ:1170mm 幅:580mm 高さ:1165mm 重量:約35kg
材質	ステンレスSUS304(フレーム) プラスチック(シート)

※1. 給水給湯設備は付属しておりません。 ※2. 仕様及び外観等は、改良のため予告なく変更することがあります。

〒104-0045 東京都中央区築地 6-16-1 築地 616ビル

TEL 03-3542-0333 FAX 03-3542-6765 ホームページ <http://metos.co.jp>

昭和飛行機グループ  
株式会社 **メトス**



- 札幌営業所
- 仙台営業所
- 東京営業所
- 名古屋営業所
- 大阪営業所
- 福岡営業所

- 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東7丁目 ノースシティ大通ビル
- 〒981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央 1-7-5 八乙女オフィスビル
- 〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1 築地616ビル
- 〒465-0004 愛知県名古屋市名東区香南 2丁目 1309-1
- 〒550-0004 大阪府大阪市西区朝本町1-6-6 大阪華東ビル
- 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町16-26

- TEL 011-272-3201
- TEL 022-771-5242
- TEL 03-3542-3455
- TEL 052-769-6144
- TEL 06-4803-0168
- TEL 092-471-5801

## ⚠️ 安全に関するご注意

- ・ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・定期的に機器の点検を行ってください。

## ● 定期点検のご案内

スローペースを末永く安全にお使いいただくために、保守点検契約（有料）をおすすめします。保守点検契約については取扱店、またはメトス各営業所へご連絡ください。

## 取扱店