

昇降式介護浴槽 ミストラル




PARKER
中山産業株式会社

ミストラル

浴槽が昇降するので、入浴者が入り易く、介護者にとって楽な姿勢がとれるので、心のこもった介護をすることができます。

- 浴槽を低くすることにより入浴者の受入れが楽にできます。
- 浴槽を高くすれば、介護者にとって無理のない姿勢がとれるので、より心のこもったお世話をすることができます。
- 浴槽が中空にあるので足元に障害物が無く、介護者が十分に浴槽に近づけるので、ゆきとどいたケアができます。
- ホイストの脚部が浴槽の下に、多方向から入ることが出来るので設置場所が自由に選べます。
- 全体がコンパクトでシンプルに作られているので、場所をとらず操作も簡単です。

寸法図

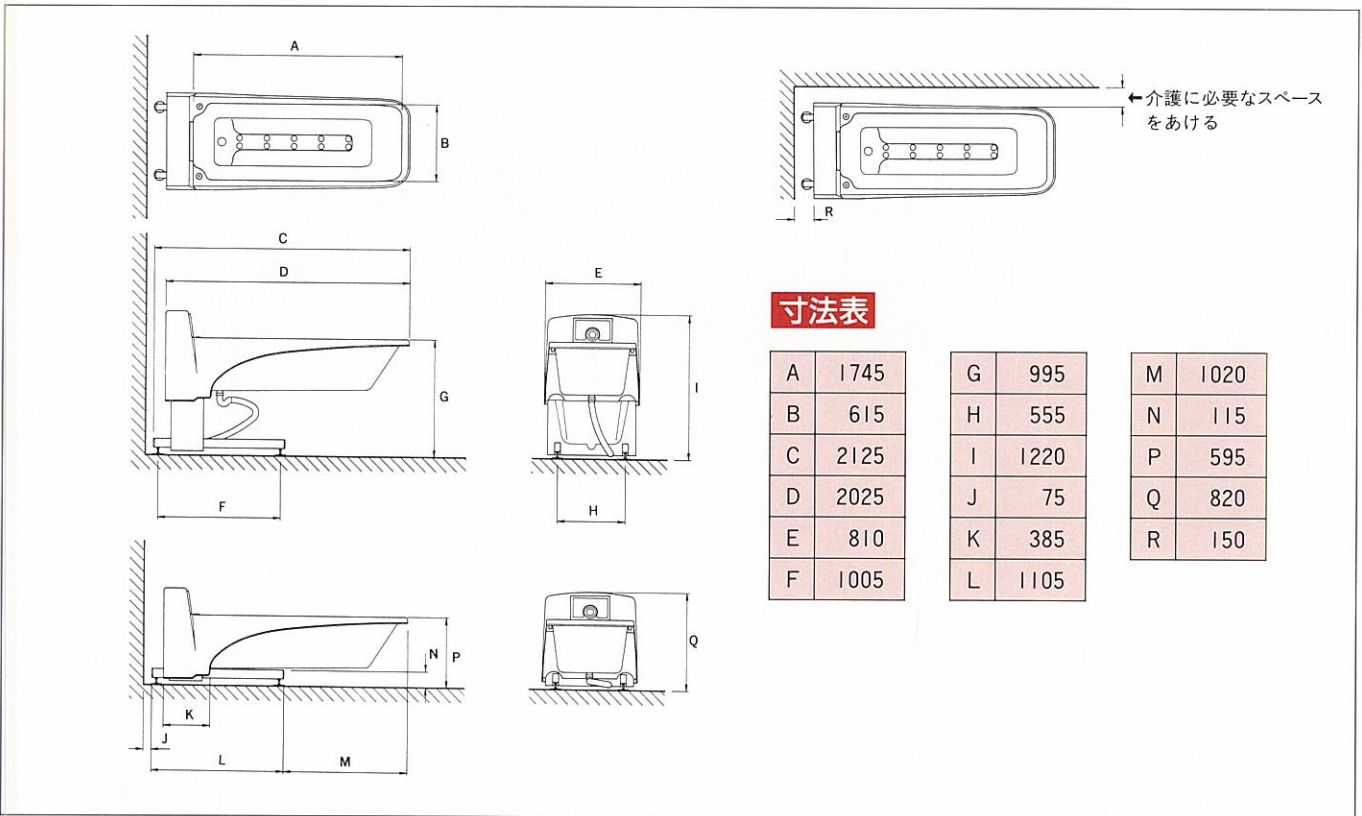

仕様

重量 本体 155kg
使用湯量 約 295ℓ
可動機構 バッテリーによる油圧モーター作動
 電圧：AC100V供給 DC24Vバッテリー駆動
 消費電力：充電時 約10ワット
 コントロール方式DC24V 有線式リモコン
配管接続 給水、給湯 3/4" フレキシブルホース (付属)
 排水 1 1/2" オネジ接続口

材質 本体 FRP製
 脚部 鋼製 焼付塗装
付属品 給水・給湯シャワーユニット
カラー (標準色) ホワイト
生産国 英国
 * オプションで気泡付きもできます

Quality with Character

中山産業株式会社
 福祉機器事業部

英国パーカー社 日本総代理店

東京都中央区銀座3-11-5(第2中山ビル) 〒104-0061 TEL(03)3542-3455(直) FAX(03)5565-1262(代)

札幌市中央区南2条西9丁目1-2(サンケン札幌ビル) 〒064-0822 TEL(011)272-3201(代) 名古屋市千種区仲田2-18-6(新仲田ビル) 〒464-0074 TEL(052)763-2811(代)

仙台市泉区泉中央3-18-2(グランヒルS T) 〒981-3100 TEL(022)371-3550(代) 大阪市北区中津1-18-18(若杉ビル) 〒531-0071-TEL(06)375-1751(代)

横浜市中区住吉町5-64-1(石渡ビル) 〒231-0013 TEL(045)664-5661(代) 福岡市博多区網場町2-2(福岡第一ビル) 〒812-0024 TEL(092)281-1773(代)